

音波振動歯ブラシ クリプテル **GULIPTELL ビブレッド** 対象年齢12歳以上

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。





安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	---	---



※1 傷害とは、治療入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。  
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	---	------------------

 **警告**

	分解禁止 ・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。
	禁止 ・対象年齢以下の子供等取扱に不馴れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※感電や思わぬケガの原因となります。
	強制 ・浴室等に長期間放置しない。 ※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。
	ぬれ手禁止 ・濡れた手で電池の交換は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。

 **注意**

	禁止 ・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・犬や猫など、ペットには使用しない。 ・乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。 ・治療中の歯や不安定な入れ歯など口内に気になる症状がある場合は、その部位に使用しない。
	強制 ・長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管する。 ・使用後は、必ずお手入れを行う。 ・歯周病がひどい方などは医師に相談の上使用する。

使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障につながります。

- ・歯や歯茎にブラシを強く当てたり、同じ部位に長時間当て続けしないでください。  
※歯や歯茎を痛める原因になりますのでご注意ください。
- ・この製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途でのご使用はご遠慮ください。
- ・スイッチなどのゴム部分を硬い物でこすったり、傷を付けたりしないでください。
- ・高温になる場所、直射日光の当たる場所への放置・保管はおやめください。
- ・落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。

仕様




寸法	約φ2×H16cm
重量	約30g
材質	ABS ナイロン
電源方式	乾電池式:単4形アルカリ乾電池1本使用(別売)
振動数	毎分約22000振動

各部名称

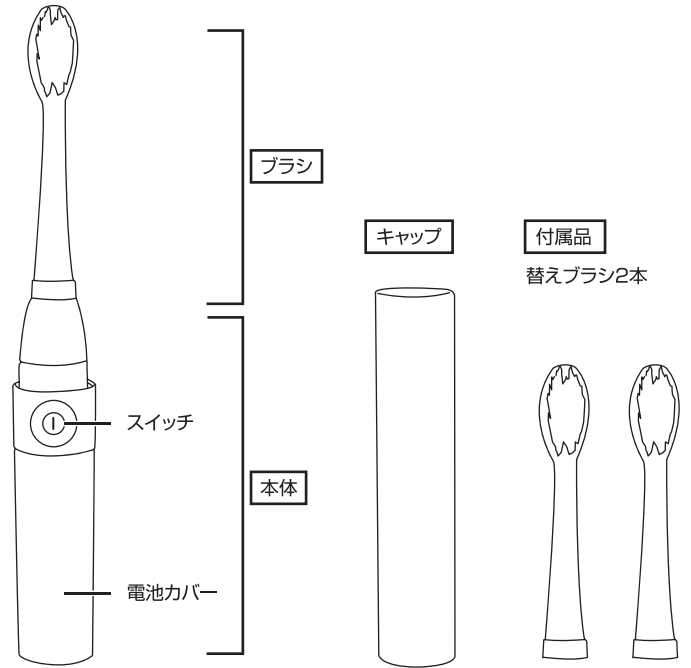

電池のセット

- ①電池カバーの指定線が、取り付け位置にくるまで矢印の方向に回します。(図1参照)
- ②電池カバーを開けます。
- ③新しい単4形アルカリ乾電池1本(別売)を+、-の向きに気をつけてセットします。(図2参照)
- ④電池カバーの指定線と取り付け位置を合わせて、奥まで差し込みます。(図3参照)
- ⑤電池カバーの指定線が固定マークにくるまで矢印の方向に回し、閉めます。(図3参照)

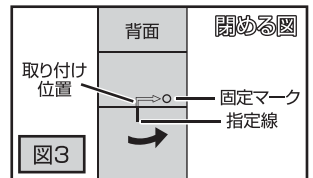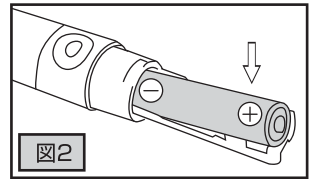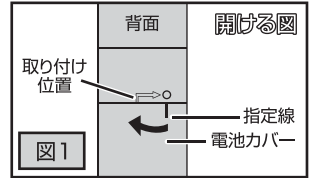


使用方法

- ※歯や歯茎にブラシを強く当てたり、同じ部位に長時間当て続けしないでください。歯や歯茎を痛める原因になりますのでご注意ください。
- ※ブラシは水洗いしてからご使用ください。
- ※本体は防水加工を施しておりますが、過度に水をかけないでください。
- ※浴室等に長期間放置しないでください。

- ①キャップを取り外します。
- ②ブラシが本体にしっかり取り付いていることを確認します。(ブラシ交換参照)
- ③スイッチを押し歯を磨きます。  
→ブラシの先端が振動します。  
※歯磨き粉をつけてご使用になる場合は、飛び散りを防ぐためにスイッチを押す前にブラシを口内に入れてください。
- ④終了後スイッチを押し稼働を停止します。

ブラシ交換

- ①ブラシを右方向にまわし、外します。(図4参照)
- ②新しいブラシ内部のくぼみと本体のつめが合うようにはめ込みます。(図5参照)
- ③ブラシを左方向にまわし、装着します。

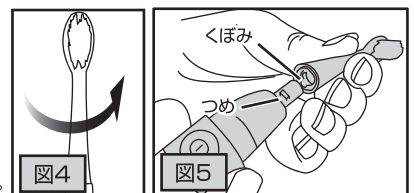

お手入れ方法

- ※ご使用後は必ずお手入れしてから保管してください。
- ※お手入れ終了後は風通しの良い所に保管してください。
- ブラシ・水洗いして、柔らかく乾いた布で拭いてください。
- 本体・柔らかく乾いた布、又は水を含ませ硬く絞った布でよく拭いてください。