

ボディエステローラー  
**BODY Esthe roller**

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。

**安全上のご注意**

⚠ 警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	⚠ 注意	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
---------	---	---------	---

※1 傷害とは、治癒に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。  
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

🚫 禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。	⚡ 強制	強制(必ずすること)を示します。
---------	---------------------	---------	------------------

**⚠ 警告**

🚫 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。</li> </ul>
🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>子供等取扱に不馴れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※思わぬケガの原因となります。</li> </ul>

**⚠ 注意**

🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品を本来の使用目的以外には使用しない。</li> <li>子供の手の届く場所に保管しない。</li> <li>乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。</li> <li>新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池は併用しない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。</li> <li>破損したら使用しない。</li> <li>不安定な場所で使用しない。</li> <li>体に強くあてすぎない。</li> <li>同じ箇所に長時間あて続けない。</li> <li>傷等がある肌には使用しない。</li> </ul>
⚡ 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管する。</li> <li>体調に異変を感じたらすぐに使用を中止する。</li> <li>お手入れの際、必ず本体から電池を抜く。</li> </ul>
🚫 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>濡れた手で電池の交換は行わない。 ※製品の故障、感電の原因となります。</li> </ul>
🚫 水濡れ禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。</li> <li>絶対に水気のある場所、水がかかる可能性のある場所で使用しない。</li> </ul>

**使用上のご注意**


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化につながります。

- ・高温になる場所、直射日光の当たる場所への放置・保管はおやめください。
- ・落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめください。
- ・この製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はご遠慮ください。

**仕様**


寸法	約W16.5×D13×H6.5cm
重量	約170g
材質	ABS ゴム TPR
電源方式	乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)

**各部名称**

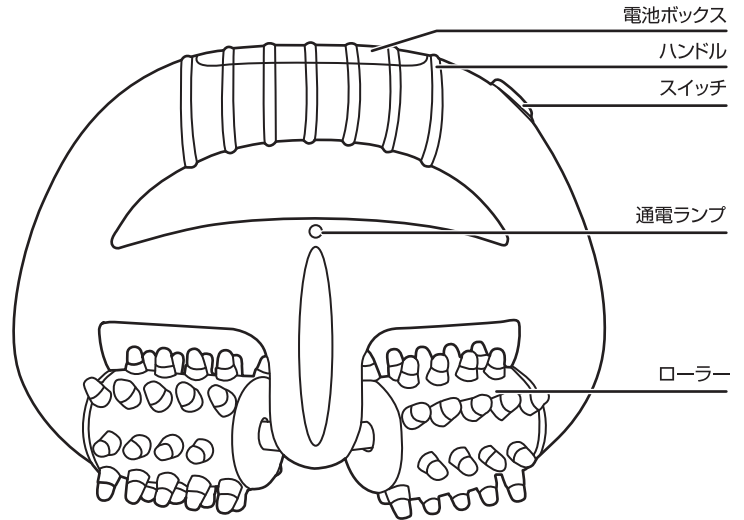

**電池のセット**

- ①電池ボックスのフタを開けます。
- ②新しい単3形アルカリ乾電池2本(別売)を+、-の向きに気をつけてセットします。(右図参照)
- ③電池ボックスのフタを閉めます。

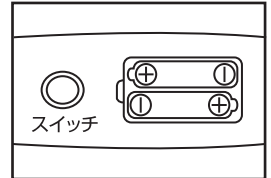

**使用方法**

- ①ハンドルをしっかり持ち、スイッチを押して電源をONにします。  
⇒通電ランプが光り、振動します。
- ②使用する箇所にやさしく当て動かします。  
※使用目安は約10~15分です。長時間のご使用はご遠慮ください。  
※体に強く当てすぎないでください。  
※同じ箇所に長時間当て続けないでください。
- ③終了する際はスイッチを押して電源をOFFにします。

**お手入れ方法**

- ※本体は防水ではありません。本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
- 肌に触れるローラーは、水で濡らして固く絞った布等で拭いてください。