

取扱説明書
保証書付

EMS FITTNESS MACHINE

MCE-3466

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告

	絶対に分解・修理・改造は行わない。※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。 ※思わぬケガの原因となります。 睡眠時や運転時は使用しない。 下記の様な方は絶対に本製品を使用しない。 <ul style="list-style-type: none"> ペースメーカー等の体内埋込型医療用電気機器を使用されている方 人工心肺等の生命維持用医療用電子機器を使用されている方 心電計等の装着形の医療用電子機器を使用されている方 病中、病後、療養中の方
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 次の様な場合は使用しない。 <ul style="list-style-type: none"> 心臓疾患及び、不整脈の方 血圧が正常値ではない方 皮膚病患者、アレルギーをお持ちの方 熱がある場合、また体調が優れない場合 結核病患者の方 生理期間中、妊婦、療養中の方 肌が弱い方
--	---

注意

	<ul style="list-style-type: none"> 本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 破損したら使用しない。 乾電池の代用として充電池電池を使用しない。 子供の手の届く場所に保管しない。 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池は併用しない。 1日の使用目安は2~3回(1セット15分)までとし、連続して使用しない。 一度に強さやスピードを上げ過ぎない。※加減しながら調節して下さい。
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 必ず粘着パッド4枚全てを体に装着した状態で使用する。 粘着パッドを全て装着していない状態(4枚以下)で本体の電源を入れしないで下さい。また、使用後は必ず本体の電源をOFFにしてから粘着パッドを外して下さい。使用中に粘着パッドが外れた場合は、必ず電源をOFFして下さい。そのままの状態(粘着パッドが4枚全て装着されていない状態)では使用しないで下さい。再度使用する場合は、粘着パッドを全て(4枚)貼り付け、初めからご使用下さい。 使用しない時は、電池を抜いて保管する。
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 濡れた手で電池の交換はしない。※製品の故障・感電の原因となります。 濡れた手で本体を扱わない。※感電・ショートの原因となります。
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 本体を水につけたり、水をかけたりしない。※感電・ショートの原因となります。
--	---


	<ul style="list-style-type: none"> 浴室などの水場で使用しない。※感電・ショートの原因となります。
--	---

使用上のご注意

この内容を守らないと製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化につながります。


- 高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はしないで下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないで下さい。
- 粘着パッドは使用後お手入れを行い、必ず保護フィルムを貼り付けて保管して下さい。 ※保護フィルムを貼らずに放置すると、表面が乾いて粘着力が弱まる場合があります。
- 本製品の粘着パッドは使用頻度により粘着が弱くなり、電気が伝わりにくくなる場合があります。その際はお手入れを行って下さい。(お手入れ方法参照)お手入れしても粘着力が戻らなくなった場合は、新しい粘着パッドを製造元・製造元ホームページ(URL <http://www.macros.ne.jp>) でお買い求めの上ご使用下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

各部名称

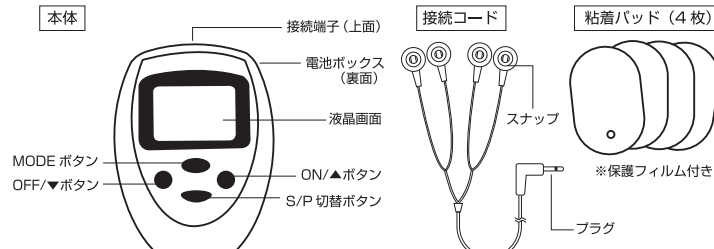

電池のセット

本体の電池ボックスのフタを開け、新しい単4形乾電池2本(別売)を+、-の方向に気をつけてセットし、フタを元に戻します。

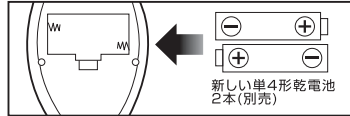

使用方法

- ※ 次の様な方は絶対に使用しないで下さい。
 - ペースメーカー等の体内埋込型医療用電気機器を使用されている方
 - 人工心肺等の生命維持用医療用電子機器を使用されている方
 - 心電計等の装着形の医療用電子機器を使用されている方
 - 病中、病後、療養中の方
- ※ 次の様な場合は使用しないで下さい。
 - 心臓疾患及び不整脈の方
 - 血圧が正常値ではない方
 - 皮膚病患者、アレルギーをお持ちの方
 - 熱がある場合又体調が優れない場合
 - 結核病患者の方
 - 生理期間中、妊婦、療養中の方
 - 肌が弱い方
- ※ 必ず粘着パッド4枚全てを体に装着した状態でご使用下さい。粘着パッドを全て装着していない状態(4枚以下)で本体の電源を入れしないで下さい。また使用後は必ず本体の電源をOFFにしてから粘着パッドを外して下さい。使用中に粘着パッドが外れた場合は、必ず電源をOFFして下さい。そのままの状態(粘着パッドが4枚全て装着されていない状態)では使用しないで下さい。再度使用する場合は、粘着パッドを全て(4枚)貼り付け、初めからご使用下さい。
- ※ 1日の使用目安は2~3回(1セット15分)までとし、連続して使用しないで下さい。
- ※ 一度に強さやスピードを上げ過ぎないで下さい。加減しながら調節して下さい。
- ※ 睡眠時や運転時は使用しないで下さい。

① 接続コードのスナップに粘着パッドを全て(4枚)取り付けます。

② 本体上面の接続端子に、接続コードのプラグをさし込みます。

③ 使用したい部位に粘着パッド全て(4枚)をしっかりと貼り付けます。
※粘着パッドを貼り付けていないと、本体は動作しません。必ず4枚全て貼り付けてご使用下さい。

④ ON/▲ボタンを押すと電源が入り、画面が表示されます。(画面表示は右図「画面表示」参照)
※動作を開始(下記手順「6」)するまでは、無操作の状態が続くと、自動的に画面が消灯します。

⑤ MODEボタンでモードを選びます。MODEボタンを押す度に下記の順番でモードが切り替わります。(各モードの説明は右図「モードとリズムパターン」参照)

モード1→モード2→モード3→肩モード→お腹モード→腕モード→関節モード→脚モード

⑥ ON/▲ボタンを一度押すと動作がスタートします。(スタート時は、強さ・スピード共に1)

⑦ ON/▲ボタンとOFF/▼ボタンで強さ(1~10)を調節します。

ON/▲ボタン→強さアップ OFF/▼ボタン→強さダウン

⑧ S/P切替ボタンを一度押すとスピード調整に切り替わります。
※S/P切替ボタンを押すことに【強さ】と【スピード】調整の切替ができます。


⑨ ON/▲ボタンとOFF/▼ボタンでスピード(1~10)を調節します。

ON/▲ボタン→スピードアップ OFF/▼ボタン→スピードダウン

● 動作が開始すると画面上で時間のカウントが開始され、約15分経過すると自動的に動作が停止し、電源がOFF(画面消灯)になります。

● モード、強さ、スピードは動作中も調整/切替を行うことが出来ます。モードを切り替えると強さとスピードは1に戻ります。

● 途中で停止する場合は、OFF/▼ボタンで強さを1まで下げ、もう一度OFF/▼ボタンを押すと動作が停止します。OFF/▼ボタンを押すか、そのまま無操作の状態が続くと画面は消灯します。

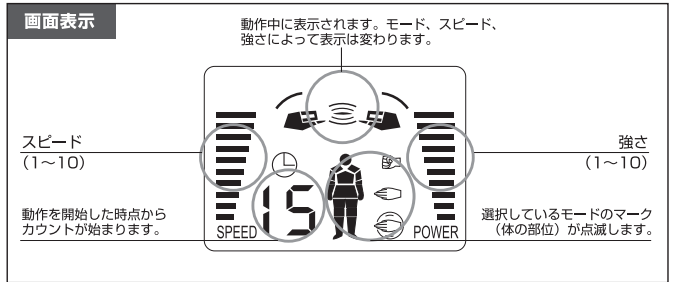

モードとリズムパターン (使用する部位に適したモード)	モード1	モード2
短い動作と間隔の連続的なリズム		長い動作と間隔の連続的なリズム
非常に長い動作と間隔の連続的なリズム	肩モード	お腹モード
腕モード	関節モード	脚モード

お手入れ方法

※ご使用後は必ずお手入れしてから保管して下さい。

本体・接続コード：柔らかく乾いた布で軽く拭いて下さい。

粘着パッド：ゴミや汚れの付着等により粘着面の粘度が低下し電気が伝わりにくくなる場合があります。その場合は粘着面に水を1~2滴ほど垂らし、軽く拭き取って汚れを取り除き保護フィルムを貼付けて保管して下さい。※保護フィルムを貼らずに放置すると、表面が乾いて粘着力が弱まる場合がありますのでご注意ください。

※ 本製品の粘着パッドは使用頻度により粘着が弱くなり、電気が伝わりにくくなる場合があります。その際はお手入れを行って下さい。(お手入れ方法参照)お手入れしても粘着力が戻らなくなった場合は、新しい粘着パッドを製造元・製造元ホームページ(URL <http://www.macros.ne.jp>) でお買い求めの上ご使用下さい。

仕様

寸法	本体：約 W7.5×D2.5×H10cm	接続コード：約110cm	重量	約100g(総重量)
材質	鉄、ABS、PVC(非フタル酸)	電源方式	乾電池式：単4形アルカリ乾電池2本(別売)	