

取扱説明書
保証書付
MCE-3609

ufurl Face esthe

フェイスエステ

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告	
	絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※感電や思わぬけが、製品の故障に繋がる恐れがあります。
	子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。 ※思わぬけがの原因となります。
	下記の方は必ず医師と相談の上、使用する。 急性疾患の方 / 悪性腫瘍の方 / 妊娠中の方 / アレルギー体質で敏感肌の方 / 皮膚炎 / 過度の日焼け等、皮膚に異常のある方 / お肌に傷や湿疹、腫れ物等のある方

注意

	<ul style="list-style-type: none"> 本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池は併用しない。 破損したら使用しない。 子供の手の届く場所に保管しない。 同じ箇所にあて続けない。 過度に使い過ぎない。※肌を傷つける原因となります。 稼働中の注水はしない 肌を吸った状態で静止しない。 傷口やにきび・吹き出物等で炎症を起こしている部位には使用しない。 目のまわり、頭部、鼻すじ、額の生え際等、皮膚の弱い所には使用しない。 吸引カップの大カップは、額・頬・アゴ以外の部位には使用しない。 吸引カップの小カップは小鼻以外の部位には使用しない。
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> お手入れの際は、必ず本体から電池を抜く。 肌に合わない場合、肌に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止する。 吸引カップでの使用時間は、目安として小鼻の周りは約1分以内、額・頬・アゴは約4分以内とする。 ※あくまでも目安です。肌に異常を感じた時は使用を中止して下さい。
--	---

	濡れた手で電池の交換はしない。※感電や思わぬけが、製品の故障の原因となります。
--	---

	本体を水につけたり、水をかけたりしない。※感電や思わぬけが、製品の故障の原因となります。
--	--

	浴室などの水場で使用しない。※感電や思わぬけが、製品の故障の原因となります。
--	--

使用上のご注意

内容を守らないと製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がる注意事項、又その他の注意を示します。



- ミストを使用する際は、精製水・蒸留水をご使用下さい。
※水道水、ミネラルウォーター又は化粧水等を使用すると、タンク内・ミスト噴出口に水垢やカルキ等が付着・沈着してミスト噴出口がつまり、製品の故障や劣化に繋がりますのでご注意ください。
- ミストを使用する際は、必ず液体を入れて下さい。液体が入っていない状態で稼働しないで下さい。
- 液体をタンクに入れたまま持ち運ばないで下さい。
- 効果には個人差があります。
- 高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

仕様

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。


寸法	本体：約 W4.5×D6×H15.5cm	重量	約210g(総重量)
電源方式	乾電池式：単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)	材質	ABS、PC、ナイロン、POM、鉄、スポンジ
タンク容量	約4.9ml		

各部名称

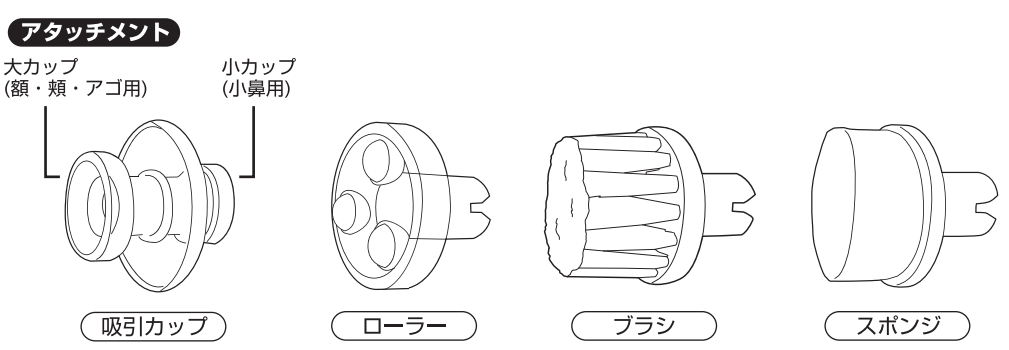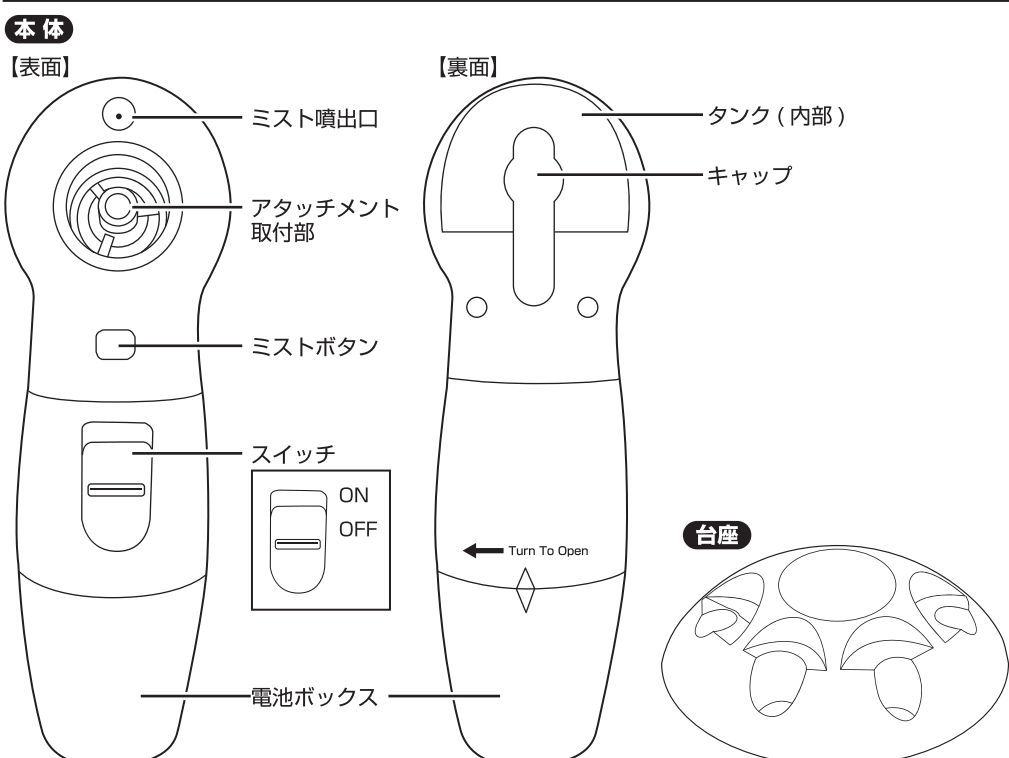


電池のセット

- ①本体を矢印の方向にひねり、電池ボックスを取り外します。
- ②新しい単3形乾電池2本(別売)を+、-の方向に気をつけてセットします。
- ③本体と電池ボックスのマーク(▲▼)が合うようにしっかり取り付けます。

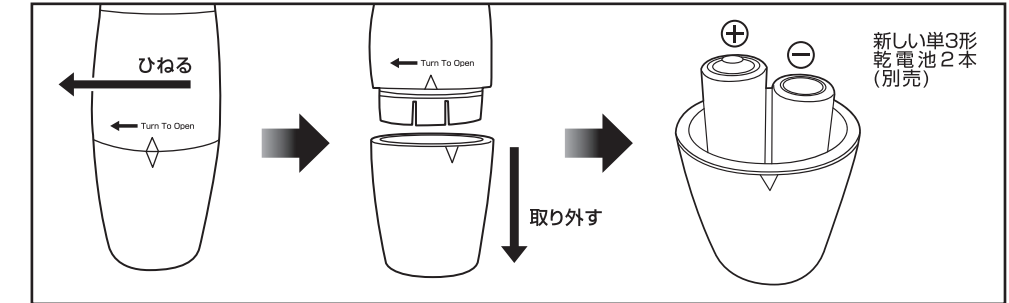

アタッチメント取り付け方法

- 本体のアタッチメント取付部に使用するアタッチメントをしっかり取り付けます。

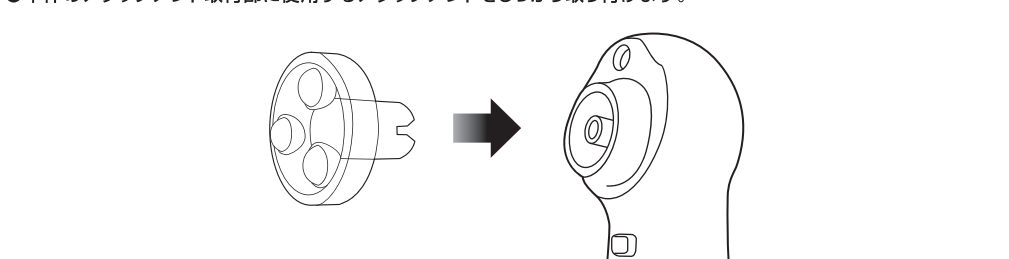

ご使用前に


- ご使用前に必ず洗顔をして皮膚の汚れを落として下さい。
- 化粧はクレンジングをして落として下さい。
- 入浴後などにご使用下さい。

使用方法

本製品には5つの機能があります。


ミスト(化粧水を肌に浸透)

- ミストを使用する際は、精製水・蒸留水をご使用下さい。
※水道水、ミネラルウォーター又は化粧水等を使用すると、タンク内・ミスト噴出口に水垢やカルキ等が付着・沈着してミスト噴出口がつまり、製品の故障や劣化に繋がりますのでご注意ください。
 - 吸引カップのアタッチメントを取り付けてご使用下さい。※アタッチメント取付部にミストが入るのを防ぎます。
- ①タンクのキャップを開けます。
 - ②スポイトなどを使い、液体をタンクに注水します。(右図参照)
※安定しているところで注水して下さい。
※最大容量は約4.9mlです。
 - ③タンクのキャップを閉めます。
 - ④本体を持ちスイッチをONにして、ミストボタンを押します。
※ミストボタンを押している間だけ、ミストが噴出します。
 - ⑤肌にミストをあてます。
※本体は立ててお持ち下さい。
※ミストが目に入らないようご注意ください。
※ミスト噴出口から水滴がたれてきた場合は、ティッシュなどで拭き取って下さい。

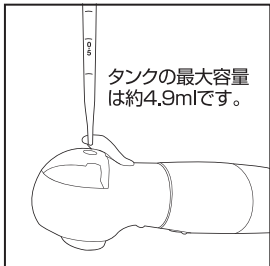


吸引カップ(毛穴の汚れを除去)

- タッピング時は水以外は肌につけないで下さい。
- ①使用するカップの反対側をアタッチメント取付部に取り付けます。
 - ②肌(使用する部分)を水で湿らせます。
 - ③スイッチをONにし、矢印の方向(右図参照)にタッピングを行いながら動かします。
※タッピングの仕方は下記をご参照下さい。
 - ④顔をすすぎ、化粧水などで肌を整えます。

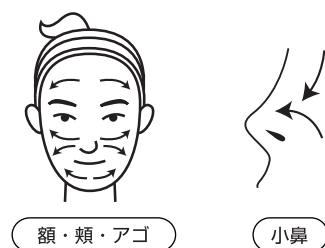

■タッピングの仕方

- ①スイッチをONにした状態で吸引カップを肌にあてると吸引カップに肌が吸い付きます。
- ②肌から本体を離します。

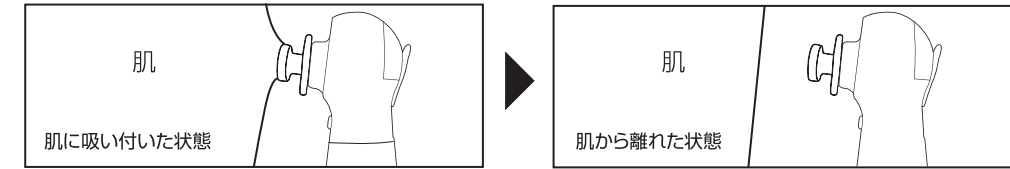

- カップが肌に吸い付いた瞬間に本体を離し、吸っては離すを繰り返して下さい。

ローラー(肌を心地よく刺激)

- スイッチをONにして肌にやさしくあてます。

ブラシ(肌の角質を除去)

- スイッチをONにして肌にやさしくあてます。

スポンジ(洗顔料を付けて肌の洗顔)

- ①スポンジに少量の水と洗顔料を付けます。
- ②スイッチをONにして肌にやさしくあてます。

お手入れ方法

- ※お手入れの際は、必ず本体から電池を抜いて下さい。
- ※本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
- 本体：台座 ⇨ 水で濡らしてかたく絞った布で汚れを拭き取って下さい。
- アタッチメント⇨水洗いして下さい。
- タンクのお手入れ
ミストが噴出しなくなったら、タンクのキャップを開けてタンクに残った液体を出します。
※タンクに液体が残っていると、こぼれますので必ずご使用後は排水して下さい。

ウフル フェイスエステ 保証書			PL保険加入済
品番	MCE-3609	お買上げ日	年 月 日
お客様	お名前		ご住所 〒
	電話番号 ()		
取扱販売店	販売店名 / 住所 / 電話番号		

この商品の保証期間はご購入後より6ヶ月間です。保証期間内でも次のような場合は保証致しかねます。
使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。火災、地震、落下、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。本書のご提示がない場合。本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

お客様サポート窓口 TEL：03-3829-5525 受付：月曜日～金曜日

