

**取扱説明書  
保証書付**

**(furl) EMS Lift plate**  
顔用フィットネスマシン EMS リフトプレート

MCE-3530

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

**安全上のご注意**

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。  
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

**警告**

絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※ 感電や思わぬけがや製品の故障に繋がる恐れがあります。

子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。  
 ※ 思わぬけがの原因となります。

下記のような方は絶対に本製品を使用しない。  
 ■ペースメーカー等の体内埋込型医療用電気機器を使用されている方  
 ■人工心肺等の生命維持用医療用電子機器を使用されている方  
 ■心電計等の装着形の医療用電子機器を使用されている方  
 ■病中、病後、療養中の方

次の様な場合は使用しない。  
 ■心臓疾患及び、不整脈の方 ■血圧が正常値ではない方 ■皮膚病患者、アレルギーをお持ちの方  
 ■熱がある場合、また体調が優れない場合 ■結核病患者の方 ■生理期間中、妊婦、療養中の方  
 ■肌が弱い方 ■にきび・吹き出物、傷等がある方 ■美容外科手術等で顔に金属やシリコンを埋め込んでいる方

**注意**

本製品を本来の使用目的以外には使用しない。  
 ・破損したら使用しない。  
 ・子供の手の届く場所に保管しない。  
 ・1日の使用目安は1回(1セット10分)までとし、連続して使用したり同じ部位に当て続けたい。  
 ・一度にLEVEL(強さ)を上げ過ぎない。 ※ 加減しながら調節して下さい。

使用しない時は、電池を抜いて保管する。  
 ・使用する箇所には必ずジェルを塗る。  
 ※ 付属ジェルが無くなった場合や肌に合わない場合は、市販のジェルをお買い求めの上ご使用下さい。

濡れた手で電池の交換はしない。 ※ 感電・製品の故障の原因となります。  
 ・濡れた手で本体を扱わない。 ※ 感電・ショートの原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※ 感電・ショートの原因となります。


浴室などの水場で使用しない。 ※ 感電・ショートの原因となります。

**使用上のご注意**


内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がる注意事項、又その他の注意を示します。

- 付属の電池はテスト用電池です。ご使用中の動作や反応が弱くなった場合は市販の電池をお買い求めの上ご使用下さい。
- 付属の電池はテスト用電池ですので、電池不良による不良品の受付は致しかねます。
- ご使用後はプレートに付いたジェルを拭き取ってから保管して下さい。
- 高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はしないで下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないで下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用のご使用はおやめ下さい。

**各部名称**

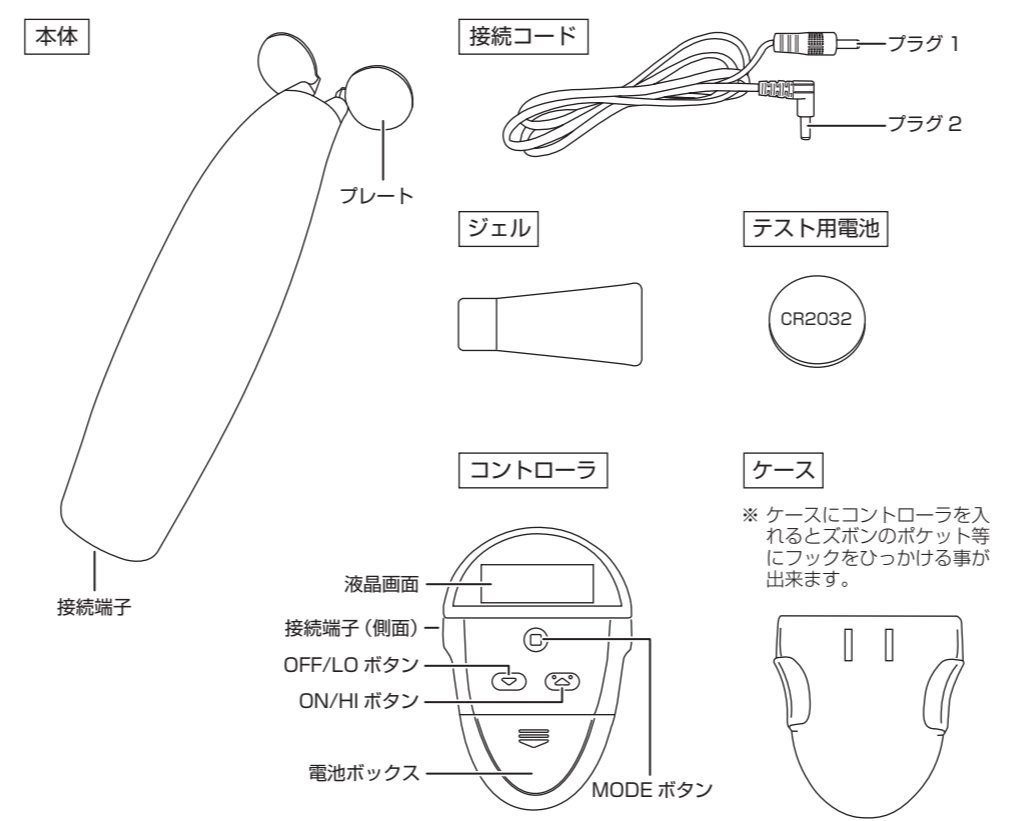

**液晶画面**

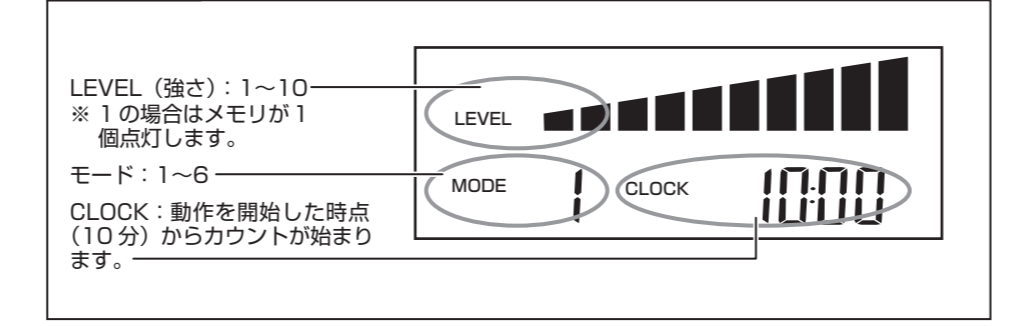


**モードとリズムパターン**

モード1	とても短い動作と間隔の連続的なリズム
モード2	長い動作と間隔の連続的なリズム
モード3	非常に長い動作と間隔の連続的なリズム
モード4	複数のプログラムを組み合わせた動き
モード5	複数のプログラムを組み合わせた動作の長い動き
モード6	短い動作と間隔の連続的なリズム

**電池のセット**

付属の電池はテスト用電池です。使用中の電源状態や動作、反応が弱くなった場合は新しい市販電池を別途お買い求め下さい。テスト用電池の不良による不良品の受付は致しかねます。

- ① 電池ボックスのフタを開け、新しいCR2032形コイン電池1個(テスト用付属)を正しい向きにセットします。(右図参照)
- ② 電池ボックスのフタを閉めます。

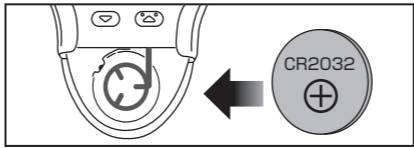


**使用方法**

※ 次の様な方は絶対に使用しないで下さい。  
 ■ペースメーカー等の体内埋込型医療用電気機器を使用されている方 ■人工心肺等の生命維持用医療用電子機器を使用されている方 ■心電計等の装着形の医療用電子機器を使用されている方  
 ■病中、病後、療養中の方

※ 次の様な場合は使用しないで下さい。  
 ■心臓疾患及び、不整脈の方 ■血圧が正常値ではない方 ■皮膚病患者、アレルギーをお持ちの方  
 ■熱がある場合、また体調が優れない場合 ■結核病患者の方 ■生理期間中、妊婦、療養中の方  
 ■肌が弱い方 ■にきび・吹き出物、傷等がある方 ■美容外科手術等で顔に金属やシリコンを埋め込んでいる方


※ 1日の使用目安は1回(1セット10分)までとし、連続して使用したり同じ箇所当て続けたい。  
 ※ 一度にLEVEL(強さ)を上げ過ぎないで下さい。加減しながら調節して下さい。

① 本体の接続端子に接続コードのプラグ1、コントローラ側面の接続端子に接続コードのプラグ2をさし込みます。

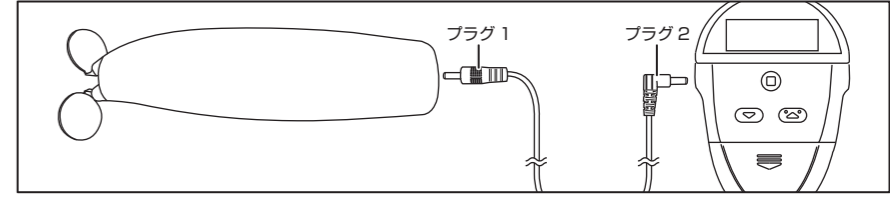


② ON/HI ボタンを押すと電源が入り、液晶画面が表示されます。(各部名称:「液晶画面」参照)  
 ※ 動作を開始するまでは(下記手順④)、無操作の状態が続くと、自動的に画面が消灯します。

③ MODE ボタンでモードを選びます。MODE ボタンを押す度に下記の順番でモードが切り替わります。(各モードの説明は各部名称:「モードとリズムパターン」参照)

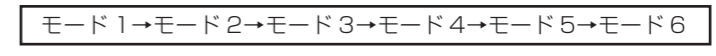


④ ON/HI ボタンを一回押すと動作がスタートします。(スタート時のLEVELは1です。)  
 ※ 10分間のタイマーがスタートします。10分経過すると自動でOFFになります。

⑤ ON/HI ボタンと OFF/LO ボタンで LEVEL (強さ:1~10)を調節します。

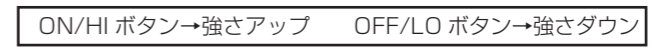

⑥ 顔にプレートをあて、ゆっくり動かします。  
 ※プレートは2面に肌に触れるようにあてて下さい。

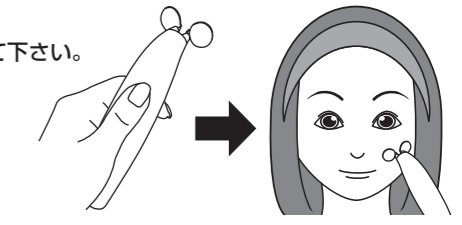

- 動作が開始すると画面上で時間のカウントが開始され、約10分経過すると自動的に動作が停止し、電源がOFF(画面消灯)になります。
- モード、強さは動作中も調整/切替を行うことができます。モードを切り替えるとLEVEL(強さ)は1に戻ります。
- 途中で停止する場合は、OFF/LO ボタンでLEVEL(強さ)を1まで下げ、もう一度OFF/LO ボタンを押すと動作が停止します。OFF/LO ボタンを押すか、そのまま無操作の状態が続くと画面は消灯します。

**お手入れ方法** ※ご使用後は必ずお手入れしてから保管して下さい。

※ 水につけたり、水をかけたりしないで下さい。感電・製品の故障の原因となります。  
 ※ お手入れの前に、必ずコントローラから電池を抜いて下さい。

本体・ケース・コントローラ: 柔らかく乾いた布で軽く拭いて下さい。  
 プレート: 水を含ませ固く絞った布でジェルを拭き取って下さい。

**仕様** ※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更する事があります。

寸法	本体:約 W4.5×D4×H14cm			コントローラ:約 W5.5×D1.5×H8cm		接続コード:約120cm	
重量	約120g(総重量)		材質	ABS 銅	ジェル容量	約30ml	
電源方式	リチウム電池式: コイン形リチウム電池CR2032形1個使用(テスト用1個付属)						
ジェル成分	水 グリセリン PG カルボマー DEA メチルクロロイソシアソリノン						